



JER Model EA-737D

Elektronički pulsni masažer (TENS)



e-Data & JER electronics

Metode tretmana

Uređaj EA-737D omogućava dva različita programa tretmana. Prvi nazivamo **tretman** a drugi **masaža**. Svaki od njih ima 6 različitih vrsta impulsnih valova.

Program 1

Tretmanski program je efikasan kod stimuliranja akupunkturne terapije za mnogobrojne poznate bolesti; pomoćno tretiranje, održavanje zdravlja i fizikalna terapija.


Program 2


Masažni način je efikasan za lakše simptome i početne stadije bolesti.

Infracrvena termoterapija

Infracrvena termoterapija se primjenjuje za pomoćno tretiranje, održavanja zdravlja i fizikalnu terapiju za lumbalne bolove, želudačne tegobe i slično.

Glavna jedinica

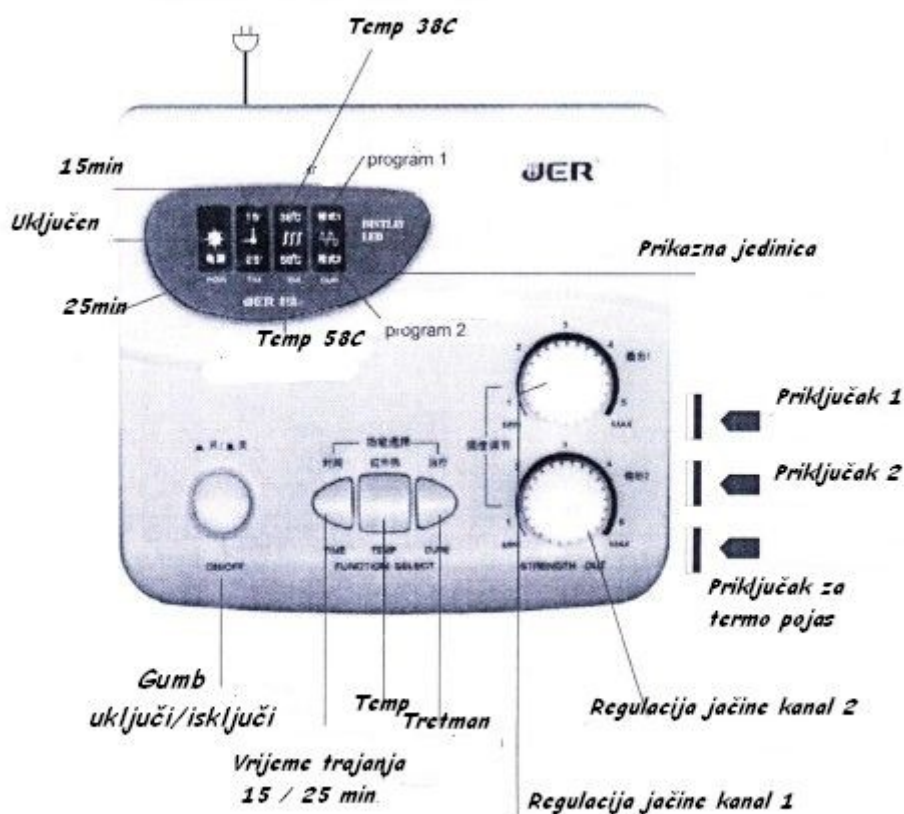


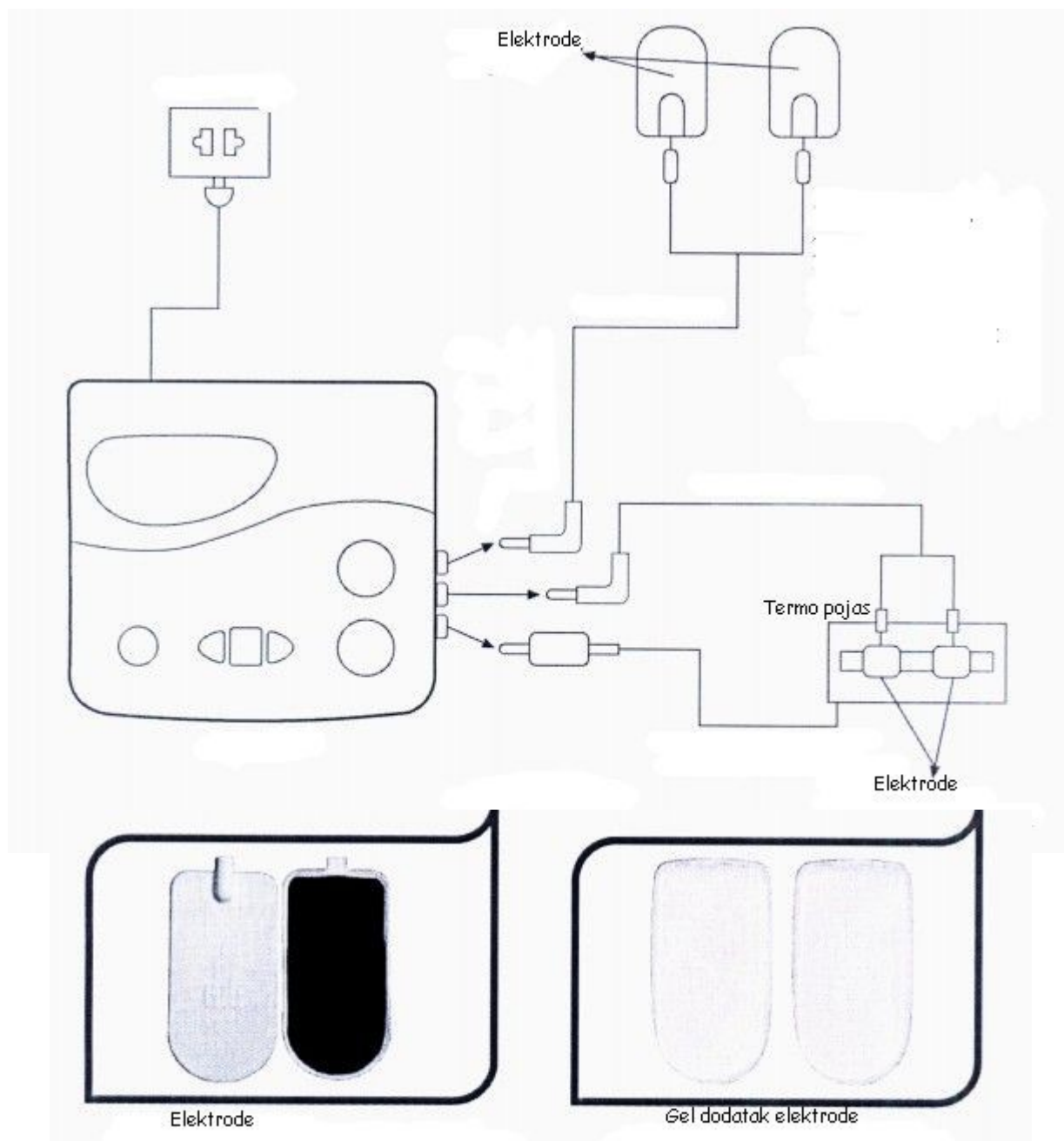


Ovalne elektrode na gornjoj slici s jedne strane su crne boje, a sa druge svijetle. Uz elektrode dolazi i par gel naljepnica, koje s obje strane imaju zaštitnu foliju. Pažljivo skinite s jedne strane zaštitnu foliju i gel naljepnicu lagano pristonite i zalijepite na **crnu stranu** elektrode. Folija na drugom kraju gel naljepnice neka ostane dok je nebudemo koristili. Zaštitna folija služi zaštititi gela od prašine, masnoća i slično.

Terapijski termo pojas

Terapijski termo pojas je s ugrađenim infracrvenim grijačem valne duljine koju tijelo veoma dobro absorbira. Na termo pojasu se na krajevima nalaze dva čička, koji se prilijepe svaki na jednu stranu s dobivenim elastičnim remenom, te se na taj način koristi npr za grijanje lumbalnog dijela kičme, ili dijelovi leđa s reumatskim bolovima. Temperatura grijanja termo pojasa se može podesiti na 38°C ili na 58°C. Odaberite onu temperaturu koja vam više pomaže u otklanjanju reumatskog bola. Savjetujemo da to utvrdite probanjem obje temperature. Termo pojas se postavlja na голу kožu, ne koristiti preko odjeće.

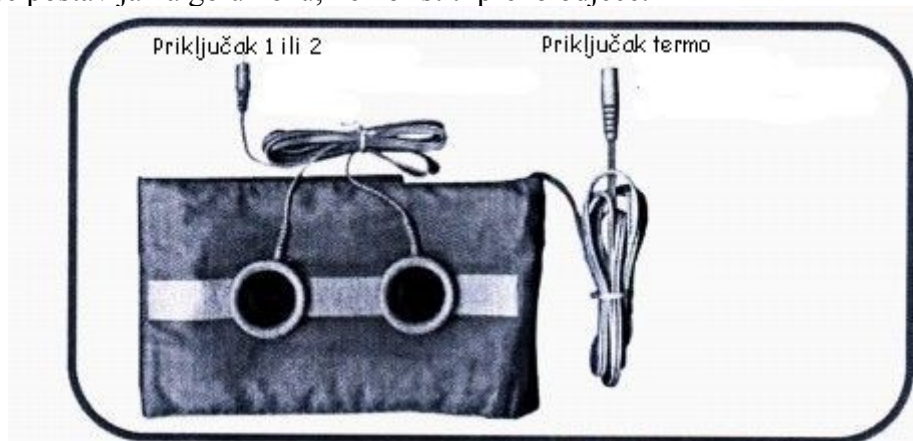

Na termo pojasu se nalazi traka čička koja se prema potrebi koristi da se za nju zalijepe elektrode (male) kao na gornjoj slici. Ove elektrode će se prisloniti na голу kožu, tako da crna strana dolazi na

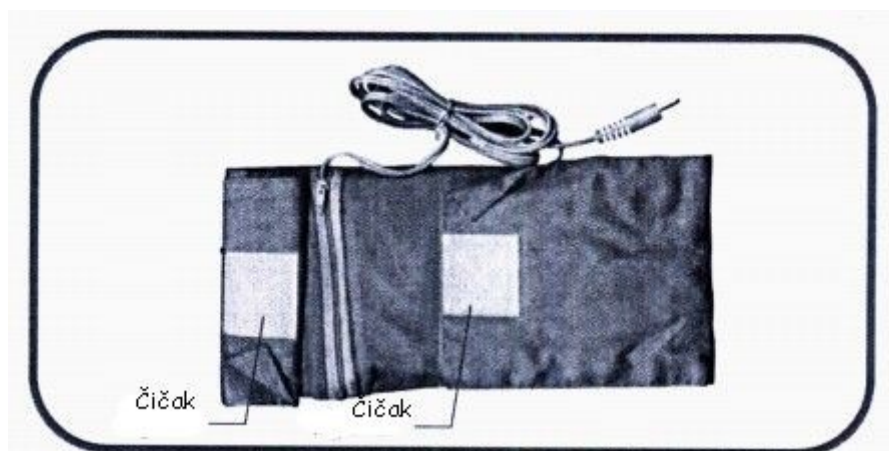

kožu, dok je na suprotnoj strani čičak. Kabel na koj su strani okrugli pinovi se priključe na svaku elektrodu druga strana ide na priključak 1 ili 2 na uređaj. Kabel koji izlazi iz termopojasa se na uređaj spaja na priključak za termo pojas. Nepostoji opasnost od greške jer je termo priključak različit od elektroterapijskih, te se nemogu greškom zamjeniti.


Početak rada

Uključite glavnu jedinicu u utičnicu sa strujom. Pratite redoslijed podešavanja prema slikama.



A

Pritisni prekidač (ON / OFF POWER SUPPLY) kao na slici. Upalit će se lampica (POW), koja simbolizira da je uređaj uključen i u stanju spremnosti.

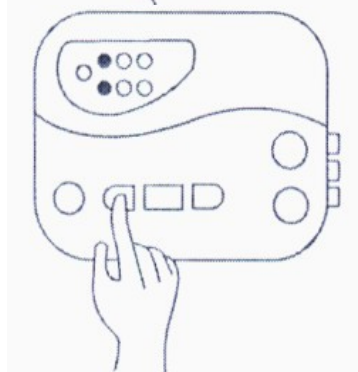


B

Pritisni gumb (TIME) kao na slici. Ovim se određuje trajanje terapije. Prvim pritiskom će zasvijetliti lampica 15, ponovnim pritiskom će zasvijetliti 25. Ovim se određuje da će terapija trajati 15 ili 25 minuta, nakon čega će se automatski prekinuti. Dnevno je dovoljna terapija od 25 minuta.




C

Pritisni gumb (TEMP) kao na slici. Ovim se određuje temperatura infracrvenog termo pojasa. Prvim pritiskom zasvijetlit će 38, ponovnim pritiskom 58. Ovim se određuje temperatura grijanja 38°C ili 58°C.

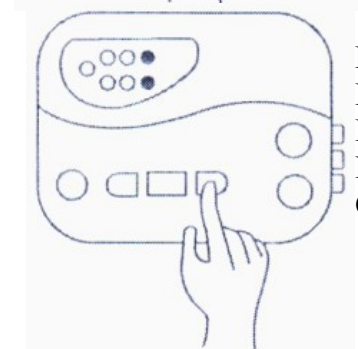

D

Pritisni tipku (CURE) kao na slici. Ovim se određuje način rada Program 1 - Terapija, ponovnim pritiskom odabere se Program 2 - Masaža. Kada je odabran Program 1 - Terapija svijetli gornja lampica CUR, a za Program 2 - Masaža, svijetli donja.

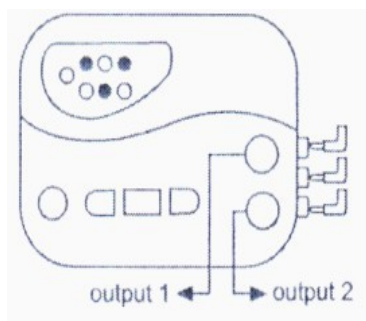

E

Primjer kada je uređaj isprogramiran da radi 15 minuta, temperatura pojasa 58°C i Program 1 - Terapija. Sada nakon što su elektrode priključene, s gumbima STRENGTH OUT Lagano okrećemo od MIN prema MAX, zaustavimo se kada osjetimo ispod elektroda peckanje. To je najčešće oko broja 3, ovisno na koji se dio tijela terapijski djeluje.

SIGURNOSNI ASPEKTI KORIŠTENJA

Nikada i nipošto ne koristite ovaj aparat ako:

1. Imate ugrađen srčani pacemaker.
2. Imate umjetno srce, pluća, bubreg i slično.
3. Prilikom korištenja EKG, jer će rezultati očitavanja biti pogrešni.
4. Ako ste spojeni na druge visoko frekventne terapijske aparate, jer će se pokvariti i uništiti.
5. Ako ste u blizini kratkovalnih ili mikrovalnih aparata koji rade.
6. Ako se primjenjuje gama nož, kod operacija može izazvati pogreške u rezanju.

Upozorenje, navedeni bolesnici nebi trebali koristiti ovaj uređaj prije nego se konzultiraju sa svojim liječnikom:

1. Bolesnici s akutnim bolesnim stanjima čiji uzroci nisu poznati.
2. Bolesnici s nenormalnim i naglim promjenama krvnog tlaka, a koji uzroci nisu poznati.
3. Bolesnici s oboljenjima kože, ulkus kože, osjetilni poremećaji kože...
4. Pacijenti sa srčanim oboljenjima.
5. Pacijenti s oboljenjima štitnjače (Hyperthyroidism).
6. Žene u periodu menstruacije i trudnoće.
7. Ljudima koji nekontrolirano gube svijest.
8. Ako je pacijent s povišenom temperaturom.
9. Pacijenti s malignim oboljenjima.


Napomena, korištenje u sljedećim uvjetima i na sljedeće načine treba potpuno izbjegavati:

1. Ne postavljaj elektrode masažera na tijelo u području zone srca,
2. Za vrijeme korištenja elektro masažera ne prebacuj elektrode na drugu osobu. Potrebno je uređaj prvo isključiti ili jačinu impulsne struje staviti na minimum. U suprotnom bi druga osoba mogla doživjeti šok i nelagodu.
3. Za vrijeme upotrebe uređaja i elektro masaže, ukoliko osjetite nelagodno i bolno peckanje, smanjite intenzitet struje, ako ne prestaje isključite uređaj i obratite se svom prodavaču.
4. Ne koristite uređaj nikada u vlažnim prostorima, kupaonici, kadi i slično, da nebi došlo do strujnog udara.
5. Ne koristite uređaj za vrijeme spavanja, a u slučaju da ga koristi dijete, obavezno treba biti prisutna osoba koja kontrolira terapiju.
6. Ne koristite uređaj za vrijeme vožnje ili upravljanja bilo kakvim strojevima.
7. Ne držite elektrode dulje vrijeme na koži tijela. Po završetku terapije ih skinite. Kako nebi izazvale kožne reakcije ili alergije.
8. Ne otvarajte niti ne popravljajte sami uređaj, a nikako nakon toga ga nemojte koristiti bez kontrole servisa.
9. Uređaj koji ste dobili je istestiran na ispravnost, i kvalitetu impulsnih masažnih valova. U slučaju da na elektrodama koje su prislonjene na kožu tijela ne osjetite impulsnu struju u obliku peckanja ili vam je u odnosu na ranije korištenje osjećaj drugačiji, isključite uređaj i obratite se prodavaču.


Primjeri primjene elektroimpulsne terapije



Tretman lica i glave

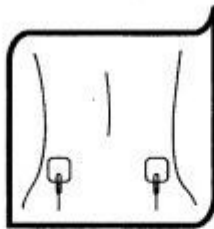

Tretman struka

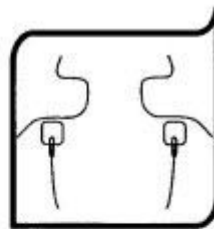


Tretman ramena



Pranje elektroda



Tretman nogu

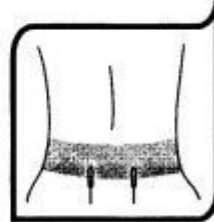


Termo i elektro
tretman struka

Sadržaj paketa

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. EA-737D elektro masažer | 1 komad |
| 2. Infracrveni termo terapijski pojas | 1 komad |
| 3. Medicinske elektrode | 1 par |
| 4. Gel naljepnice za elektrode | 1 par |
| 5. Kablovi za elektrode | 2 komada |
| 6. Elektrode male s čičkom | 1 par |
| 7. Elektrode šlape | 1 par |
| 8. Priručnik za korištenje uređaja | 1 komad |

Atlas akupunkturnih točaka na tijelu

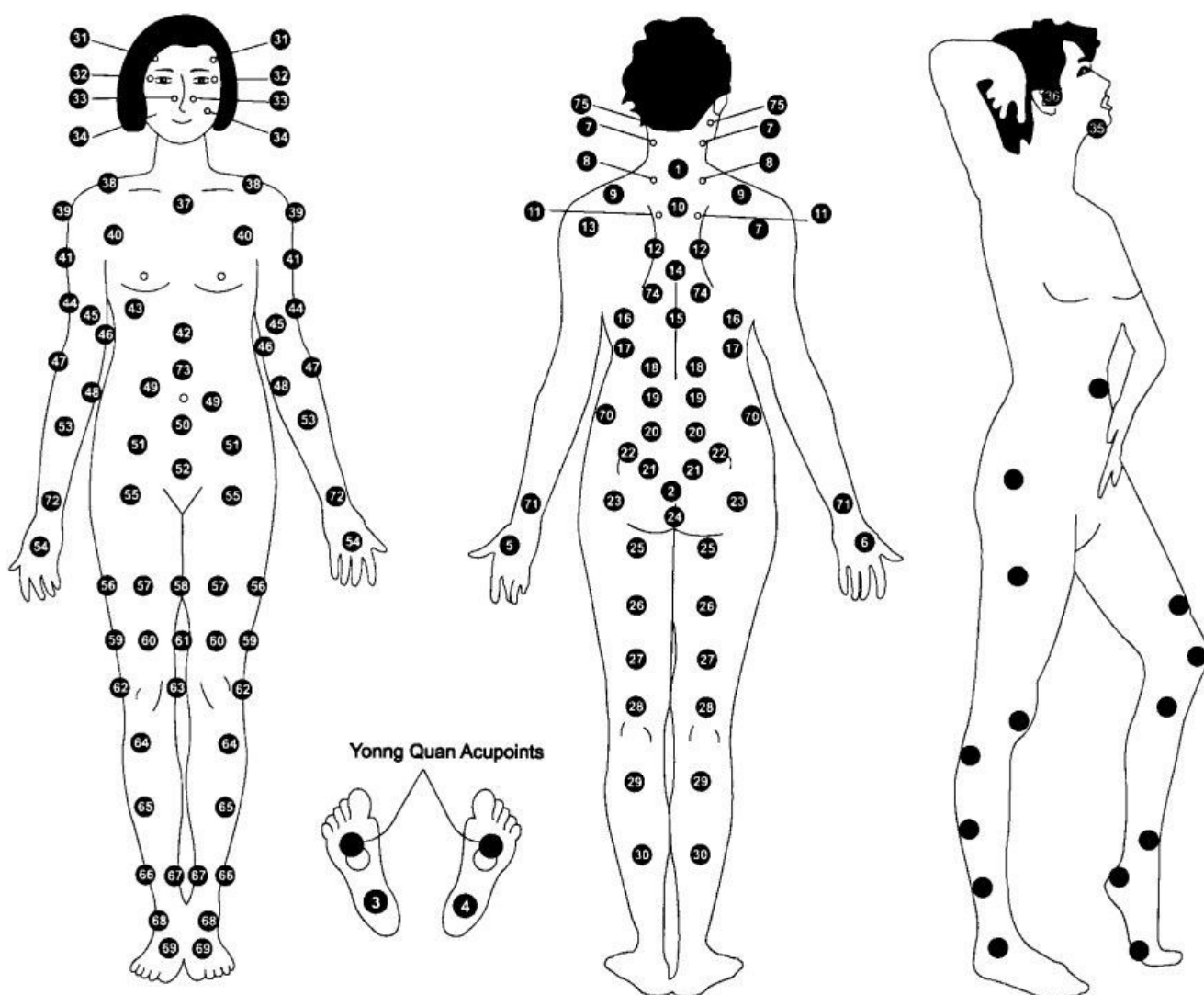

Simptomi	Točka terapije	Simptomi	Točka terapije
Glavobolja	7 - 7 31 - 31	Upala zglobova	62 - 63 18 - 18
Umor očiju	7 - 7 32 - 32		3 - 2 4 - 2
Zubobolja	točka bola - 1	Nesanica	21 - 21 3 - 4
Bol u ramenu	8 - 8 9 - 9 9 - 12	Nervoze	11 - 11 21 - 21 3 - 4
Lumbago	20 - 20 21 - 21 22 - 22	Hemiplegija	1 - 71 1 - 48 1 - 53
Nervna utrnulost	20 - 20 21 - 21 23 - 23 27 - 25 68 - 64		2 - 61 2 - 67 2 - 68
		Reuma	točka boli - točka boli

Visok krvni tlak poseban tretman

Prekomjerna težina	7 - 7 11 - 11 21 - 21 3 - 4	Menstrualni grčevi	52 - 2 24 - 2 23 - 23
Bol u glavi i ramenima	7 - 7 8 - 8	Hemoroidi	53 - 1 20 - 64
Bol stomaka	49 - 74 73 - 74 74 - 74	Facijalna paraliza	31 - 1 34 - 1 točka boli - 61
Problemi s probavom	34 - 18 18 - 18 49 - 49	Bol od upale živaca	1 - 2
Grčevi u stomaku	73 - 74	Bolovi u nogama	3 - 4
Diabetes	64 - 67 49 - 51 18 - 25	RELAXACIJA	49 - 49
		poboljšanje općeg	70 - 70
		stanja, izgaranje	41 - 45
		masnoća	44 - 46 47 - 48 26 - 57 59 - 61 29 - 64

Dodatni pribor

Dodatni pribor koji nije uključen uz kupljeni paket, a koji može unaprijediti terapijske vrijednosti uređaja:



1) Elektroda za poboljšanje cirkulacije, učvršćivanje i popravljjanja tonusa ženskih grudi. Više veličina: Ø 11cm, Ø 13,5cm i Ø 16,5cm
Pakiranje: 1 par



2) Elektrode za oči. Elektro tretman zone lica oko očiju, sljepoočnica i vrha nosa. Tretmanom se poboljšava cirkulacija i tonus očnih kapaka, čime se postiže učvršćivanje i uklanjaju problemi tzv. spuštanja kapaka. Poboljšava se tonus podočnjaka. Poboljšanje stanja kod problema sinusa. Veličina: univerzalna.
Pakiranje: 1 komad



Handheld Electrode

3) Elektrode za šake. Elektro terapijom šaka poboljšava se cirkulacija u šakama i uklanjaju trnci. Terapija šake je korisna i kod svih sportaša koji koriste ruke, tj. šake u sportu (košarka, rukomet, boks...) jer se time uklanja napaetost, bolovi i umor, a poboljšanjem cirkulacije dolazi do jačanja mišića.

Veličina: univerzalna

Pakiranje: 1 par



Ear Clip

4) Elektrode Clip za uši. Postavljaju se po jedna na svako uho s donje strane. Terapijom se uklanja umor, stanja nervoze a posebno depresivna stanja. Ovom terapijom se otklanjaju problemi nesanicе, a san postaje normalan.

Veličina: univerzalna

Pakiranje: 1 komad (par klipsi)



E-Cupplings

(Φ 2.8cm, Φ 3.2cm, Φ 3.5cm, Φ 4.0cm)

5) Elektrode E-Cupping su za profesionalni tretman. Imaju jednu usku točku strujnog djelovanja, a na kožu se pričvršćuju vakumom preko ugrađene gumene pumpice. Ovaj tip elektroda se rašireno koristi u terapijskim ustanovama.

Veličina: više veličina

Pakiranje: 1 par



Electrode Pad(sticky)

(4x4cm 4x6cm 4x8cm 8x15cm)

6) Gel podloške za elektrode. Ovo su samoljepive strujno vodljive mekane gel podloške za elektrode koje su u vašem sadržaju paketa. Njihova upotreba ih svakodnevno oštećuje radi nježne i mekane strukture, pa ih je s vremena na vrijeme potrebno zamjeniti. Jednostavno se stare, oštećene odlijepe, a nove zalijepe na isto mjesto. Ove podloške treba paziti od dodira s prašinom i masnoćama. Uz pažljivu upotrebu i zaštitu mogu izdržati i do stotinjak tretmana. Perive su u hladnoj vodi.

Veličina: kao elektrode

Pakiranje: 1 par

Garancijski uvjeti

Vaš kupljeni uređaj EA-737D ima garanciju od 12 mjeseci od datuma kupovine. Datum kupovine se utvrđuje predočenjem računa.

Garancija se odnosi isključivo na uređaj. Elektrode, kablovi, terapijski pojas i slično predstavljaju potrošni materijal.

Garancija ne obuhvaća mehanička oštećenja koja su evidentno nastala lomom, padom ili bilo kojim namjernim ili nenamjernim oštećenjem kućišta.

Garancijom nisu obuhvaćeni kvarovi koji su nastali uslijed grmljavine ili udara groma u neposrednoj blizini. Uređaj za vrijeme grmljavinskog nevremena isključite iz strujne utičnice.

Garancijom nisu obuhvaćeni kvarovi nastali nepropisnim rukovanjem. Pri rukovanju se obavezno pridržavati uputa.

U slučaju garancijskog ili izvan garancijskog kvara kontaktirati:

e-Data d.o.o.

**Podgorje Jamničko 1
10451 Pisarovina**

Telefon:

(01) 5804-777

(01) 5804-888

092 29 888 91

e-mail: ed@edata.hr

web: www.edata.hr

Želimo Vam uspješno korištenje Vašeg uređaja,

da Vam otkloni mnoge zdravstvene probleme

i

puno zdravlja koje će Vam donijeti.